


Attribut	Valeur	
----------	--------	--

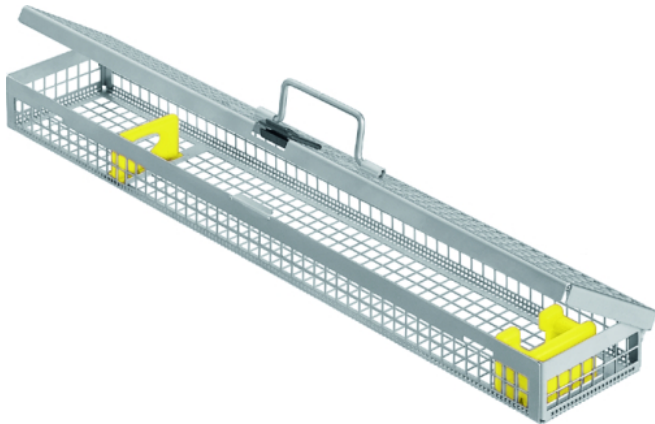

SAP Code	JF431R	
SAP Shorttext	CASIER A OPTIQUE P.1 OPTIQUE JUSQ 340MM	
BKC name	PANIER PERFORE , POUR 1 OPTIQUE JUSQU' A 300 MM	
Recherche de produit	Panier pour optiques	
Longueur extérieure (mm)	454.0	
Largeur extérieure (mm)	84.0	
Hauteur extérieure (mm)	41.0	
Longueur intérieure (mm)	448.0	
Largeur intérieure (mm)	78.0	
Hauteur intérieure (mm)	34.0	
Étape chirurgicale	Emballage	
Matrice de données	Non	
Classe CE (Rel. 7)	34410803	

fiche de données
technique

Numéro de référence JF431R



Attribut	Valeur	
Description eCI@ss (Rel. 7)	Scope-tray (sterilisation)	
Product contains Latex	Non	

Informations sur le nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux

Numéro de référence JF431R



Used methods	Description	Explication / conseils
Préparation au lieu d'utilisation	voie humide ou sèche	Voie humide signifie que les instruments sont déposés dans une solution désinfectante et détergente active immédiatement après l'opération. Veuillez tenir compte des indications du fabricant du produit nettoyant. Voie sèche signifie qu'après l'opération les instruments sont déposés sans produit de désinfection ni autres liquides additionnels, puis amenés aux services centraux d'asepsie.
Nettoyage et désinfection	traitement stérile manuel ou en machine avec / sans traitement aux ultrasons	
Produits chimiques et températures pour le nettoyage et la désinfection	acide / neutre / alcalin avec / sans addition de dérivés tensioactifs, chimique à un max. de 60° C / 140° F ou thermique à l'eau déminéralisée à un max. de 93° C / 199° F	On postule que sont utilisés des produits de nettoyage et de désinfection disponibles dans le commerce et autorisés pour le cas d'application, et que les concentrations, temps d'action et températures recommandés sont observés. Il est impératif de s'assurer qu'aucun résidu ne demeure sur les produits. Le rinçage final doit être effectué avec de l'eau déminéralisée.
Séchage	séchage à un max. de 120° C / 248° F	
Procédés de stérilisation à la vapeur	134°C / 273°F inférieur/égal à 18 min temps de maintien ou 121°C / 250°F inférieure/égal à 20 min temps de maintien	Ces données indiquent les températures maximales et les temps de maintien.
Autres procédés de stérilisation	formaldéhyde (max. 65° C / 149° F), oxyde d'éthylène (max. 65° C / 149° F), air chaud (max. 180° C / 356° F), gaz ionisé (plasma) (p. ex. STERRAD®), stérilisation liquide (p. ex. STERIS®)	La compatibilité du matériau avec ce procédé de stérilisation est indiquée indépendamment du résultat de stérilité. L'application de ces procédés relève de la responsabilité de l'exploitant pour ce qui est de l'obtention de l'effet de stérilisation recherché.

Informations sur le nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux

Numéro de référence JF431R



Used methods	Description	Explication / conseils
Procédés de stérilisation agréés	conformément au mode d'emploi, stérilisation à la vapeur par procédé du vide fractionné à 134° C / 273° F, durée de maintien de 5 min.	Pour des informations détaillées, veuillez cliquer sur le lien vers le mode d'emploi au-dessus du tableau
Autres consignes à observer		Les instruments à articulation (pinces, ciseaux, etc.) ou présentant des surfaces de glissement métalliques (emporte-pièce, ciseaux costaux, etc.) doivent être huilés avant chaque stérilisation pour éviter une perte de souplesse ou une corrosion par frottement. Nous recommandons l'utilisation de nos produits JG 598 ou JG 600. Les produits portant des inscriptions laser peuvent perdre leur couleur en cas de traitement avec des nettoyeurs de base contenant de l'acide phosphorique ou fluorhydrique. La fonction de codage peut alors être perturbée ou entièrement invalidée.
Validé		